

# Safe Ear Curettes™

Met Bionix® Safe Ear Curettes kunnen zorgverleners veilig en met zachte hand cerumen verwijderen met het type curette dat het meest geschikt is voor de specifieke soort oorsmeer en de persoonlijke voorkeur.



## PROBLEEM

Harde, starre curettes van roestvrij staal veroorzaken niet alleen pijn en ongemak bij de patiënt, maar kunnen ook gemakkelijk het oorkanaal en het trommelvlies beschadigen.

## OPLOSSING

Bionix Safe Ear Curettes zijn flexibel, zodat de kans op letsel aan het oorkanaal wordt verminderd, waardoor ze veiliger zijn dan curettes van roestvrij staal.

## RESULTATEN

Zeven kleurgecodeerde soorten tips voor specifieke behoefte, zodat je voor elke cerumensituatie 'het juiste gereedschap voor elke klus' hebt.

*'Ik gebruik al oorcurettes van Bionix sinds mijn opleidingstijd. Voor mij zijn ze de gouden standaard.'* - Sidney Shah, MD

## POTENTIËLE VERGOEDING (UITSLUITEND VS)

CPT-code/Beschrijving

**69210** - Voor potentiële vergoeding voor geïmpacteerd cerumen.



SINGLE  
USE ONLY

**Rx ONLY**

**MADE IN  
THE U.S.A.**



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussel, BELGIË  
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net  
Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd, Toledo, OH, 43612, U.S.A.  
Telefoon: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com

  
**bionix**®

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ALLEDAAGSE PROBLEMEN

+1 800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)

©2021 Bionix LLC | INTL-0045-NL | Rev. A

# Safe Ear Currettes™

## PRODUCTAANBOD




### Gele CeraSpoon® | Nr. 6333

De gele CeraSpoon is perfect voor zachter oorsmeer, vooral bij patiënten die overmatig veel cerumen produceren. 4 mm



### Oranje ControLoop® | Nr. 2999

De oranje ControLoop heeft een gebogen 'Shapleigh' tip waarmee oorsmeer recht uit het oorkanaal kan worden getrokken. 4 mm

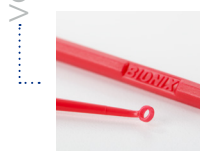

### Rode AngleLoop® | Nr. 3444

De rode AngleLoop heeft een tip onder een hoek waarmee moeilijk te bereiken taai cerumen, zoals zich vaak voordoet bij oudere patiënten, beter bereikbaar wordt. 4 mm



### Witte FlexLoop® | Nr. 9555

De witte FlexLoop is een allround curette die is bedoeld voor normale curettage bij uiteenlopende soorten patiënten. 4 mm



### Paarse VersaLoop® | Nr. 4111

De paarse VersaLoop heeft een gladde flexibele tip die de gebruiker uitzonderlijke controle biedt en comfortabeler is voor de patiënt. 3 mm



### Blauwe InfantScoop® | Nr. 4888

De blauwe InfantScoop is ontworpen voor kleinere oren en kan worden toegepast via een otoscoop. 2 mm



### Groene MicroLoop® | Nr. 1222

De groene MicroLoop is stijver en is bedoeld voor het verwijderen van taai, geïmpacteerd cerumen. 3 mm

VOLWASSENEN

ALGEMEEN

JEUGDIGE PATIËNTEN

## GEBRUIKSAANWIJZING



### NORMALE CURETTAGE

1. Gebruik een otoscoop om de positie van het cerumen te bepalen.
2. Kies de juiste curette voor het type patiënt en het soort cerumen.
3. Plaats de curette in het oorkanaal om het cerumen te verwijderen.
4. Onderzoek het oor opnieuw met de otoscoop en bepaal de locatie van eventueel nog resterend cerumen.



### OTOSCOOP-CURETTAGE

1. Gebruik een otoscoop om de positie van het cerumen te bepalen.
2. Selecteer een van de Safe Ear Currettes™ voor jongeren.
3. Schuif het vergrootglas van de scoop opzij.
4. Plaats de curette via de otoscoop en verwijder het cerumen.

*'De verscheidenheid van maten en vormen van de tips maakt het verwijderen van oorsmeer makkelijker dan ooit.'* - Carl A. Moritz, Jr., MD

BIONIX®, CeraSpoon®, FlexLoop®, InfantScoop®, MicroLoop®, AngleLoop®, VersaLoop® en ControLoop® zijn geregistreerde handelsmerken. Safe Ear Currettes is een handelsmerk van BIONIX.

Gepatenteerd - The ControLoop, CeraSpoon, VersaLoop, FlexLoop, InfantScoop and AngleLoop.



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ALLEDAGSE PROBLEMEN

+1 800.551.7096 • [www.bionix.com](http://www.bionix.com)