


sempermed® supreme

TYPE	Steriele operatiehandschoenen voor eenmalig gebruik, poedervrij, met synthetische binnencoating	
MATERIAAL	Natuurlijke rubber latex (NR)	
KLEUR	Natuurlijk wit	
HANDSCHOENVORM	Volledig anatomisch met rolrand	
TOTALE LENGTE/MAAT volgens EN 455-2	5 ½, 6 en 6 ½ 7, 7 ½ en 8 8 ½ en 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm
WANDDIKTE in de handpalm enkelvoudig gemeten	0,19 - 0,23 mm	
DICHTHEID volgens EN 455-1	AQL 1,0	
TREKSTERKTE volgens EN 455-2	≥ 12 N	
HOUDBAARHEID in originele verpakking bij opslag overeenkomstig DIN 7716, ISO 2230	3 jaar	
STERILISATIE	Gammabestraling met minstens 2,5 Mrad (25 kGy)	
VERPAKKING	Linker en rechter handschoenen met omgeslagen manchet in pluisvrije binnenenveloppe, ozondicht, ingeseald in medische peel open-folieverpakking In dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 50 paar In verzenddoos met sterilisatie-indicator: 300 paar	
REF. NR. FABRIKANT	Maat 5,5 822751521 Maat 6,0 822751601 Maat 6,5 822751621 Maat 7,0 822751701	Maat 7,5 822751721 Maat 8,0 822751801 Maat 8,5 822751821 Maat 9,0 822751901
ETIKETTERING	EN 1041, EN 980, ISO 15223	



NEEM CONTACT MET ONS OP!
Mediq Medeco
Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland
Telefoon (0186) 63 44 00 | Fax (0186) 61 68 93
info.medeco@mediq.nl | www.mediqmedeco.nl

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.
Division Sempermed
Austria · 1030 Vienna · Modecenterstraße 22
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com

sempermed®
supreme

SUPREME

KWALITEIT IN IEDER OPZICHT

GEMAKKELIJK AAN TE TREKKEN – gepatenteerde synthetische binnencoating
ABSOLUUT HUIDVRIENDELIJK – het Semperit nabehandlingsprocédé
OPTIMALE VEILIGHEID – bij een ideaal tastgevoel





KWALITEIT IN IEDER OPZICHT

Sempermed Supreme staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is niet voor niets een van de meest gedragen poedervrije operatiehandschoenen in Europa. Dit gegeven verplicht Sempermed ertoe haar producten vanuit de fabriek in Oostenrijk voortdurend te optimaliseren en de kwaliteit ervan met het oog op uw veiligheid in ieder opzicht voortdurend te verbeteren – al 90 jaar lang.

GEMAKKELIJK AAN TE TREKKEN

Wrijving is een kwestie van weerstand

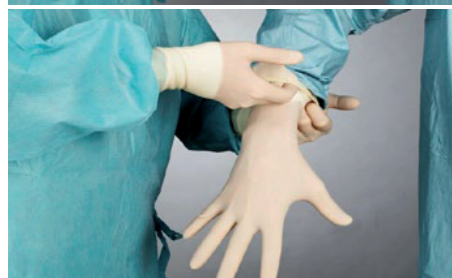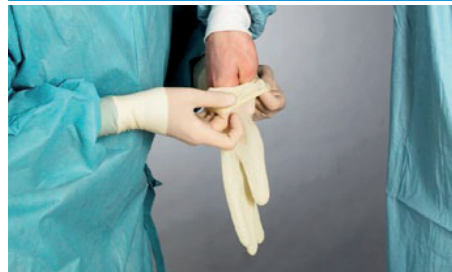

EEN GOED BEWAARD GEHEIM

De synthetische binnencoating, die ervoor zorgt dat de Sempermed Supreme zo gemakkelijk aangetrokken kan worden, is het resultaat van jarenlang ontwikkelingswerk. De structuur van de coating is gepatenteerd.

HET COATINGSYSTEEM

Waarom de Sempermed Supreme zo gemakkelijk aangetrokken kan worden, is eenvoudig te verklaren: de binnencoating heeft geen glad oppervlak, maar een speciale structuur die lijkt op een netwerk. Daardoor wordt het contactvlak van de film met de huid geoptimaliseerd, zodat de wrijvingsweerstand bij het aantrekken aanzienlijk wordt verminderd. De structuur zorgt ervoor dat de handschoenen op de huid aangenaam fluweelachtig aanvoelen.

TIJDENS EEN OPERATIE VAN HANDSCHOENEN WISSELEN

Uit onderzoek blijkt dat 24-37% van de chirurgische handschoenen na gebruik perforaties vertoont (World J. Surg., 1999). Wanneer een ingreep langer duurt, leidt daarnaast het transpiratievocht tussen huidoppervlak en handschoen ertoe dat het bescherm-laagje van de handschoen gaat opzwellen. Sempermed adviseert daarom tijdens een operatie regelmatig nieuwe handschoenen aan te trekken. De speciale binnencoating van de Sempermed Supreme maakt het daarbij veel gemakkelijker de handschoenen „vochtig” aan te trekken.

DUBBEL AANTREKKELIJK



TWEE PAAR HANDSCHOENEN OVER ELKAAR

Om de bescherming tegen infecties te optimaliseren, wordt het dragen van twee paar handschoenen over elkaar hoe langer hoe gebruikelijker.

Bij bijzonder zware belasting en bij risicopatiënten biedt het dragen van twee paar handschoenen over elkaar optimale veiligheid. De Sempermed Supreme kan ook in dit geval gegarandeerd probleemloos worden aangetrokken zonder dat dit ten koste gaat van het tastgevoel.

PERFECT TASTGEOVEL

Met fijngevoeligheid naar topprestaties



OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

Door de perfecte, volledig anatomische pasvorm



VOOR EEN GEZONDE HUID



OPTIMALE BETROUWBAARHEID

U bent werkzaam op een uiterst gevoelig vakgebied dat een precieze fijne motoriek en een optimaal tastgevoel vereist. De beslissende factor voor een zo groot mogelijke betrouwbaarheid in combinatie met een uitstekend gevoel is de wanddikte.

ALS EEN TWEEDE HUID

Dankzij de stevigheid van het materiaal kon de wanddikte van de Sempermed Supreme zo ver worden teruggebracht dat uw fijngevoeligheid door het dragen van de handschoenen absoluut niet wordt beïnvloed en een zo groot mogelijke betrouwbaarheid gewaarborgd is. Hij is als het ware een nauwelijks voelbare tweede huid. En als het er echt op aan komt, profiteert u van het feit dat u zonder enig probleem twee paar over elkaar kunt aantrekken.

UW HAND ALS MAAT VAN ALLE DINGEN

Uw hand is uniek. Datzelfde geldt voor de vorm van de Sempermed Supreme. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van de operatiekamer, stemt de volledig anatomische vorm met gekromde vingers overeen met de natuurlijke, ontspannen houding van de hand.

EEN PERFECTE AFSLUITING

De conische schacht is afgestemd op de anatomie van de pols en heeft een rolrand die goed aansluit op de operatiejas en daardoor perfect afsluit.

WERKEN ZONDER VERMOEID TE RAKEN

De bedoeling van deze ontspannen houding van de hand is te waarborgen dat u met Sempermed Supreme kunt werken zonder vermoeid te raken – en dat u de instrumenten ook bij de langste operaties ontspannen, rustig en zeker kunt blijven hanteren. Een essentiële bijdrage daartoe levert ook de extra brede rug van de handschoen.

ABSOLUUT HUIDVRIENDELIJK – HET SEMPERIT NABEHANDELINGSPROCÉDÉ

Sempermed maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld, automatisch nabehandelingsprocédé waarbij de handschoenen verschillende keren intensief worden gewassen. De hoeveelheid bij de productie gebruikte stoffen die huidirritaties kunnen veroorzaken, en het eiwitgehalte van het verwerkte natuurlatex worden daardoor gereduceerd tot het technisch mogelijke minimum.